


Test IDEXX Cancer Dx™:

Interpretace výsledků u klinicky nemocných psů

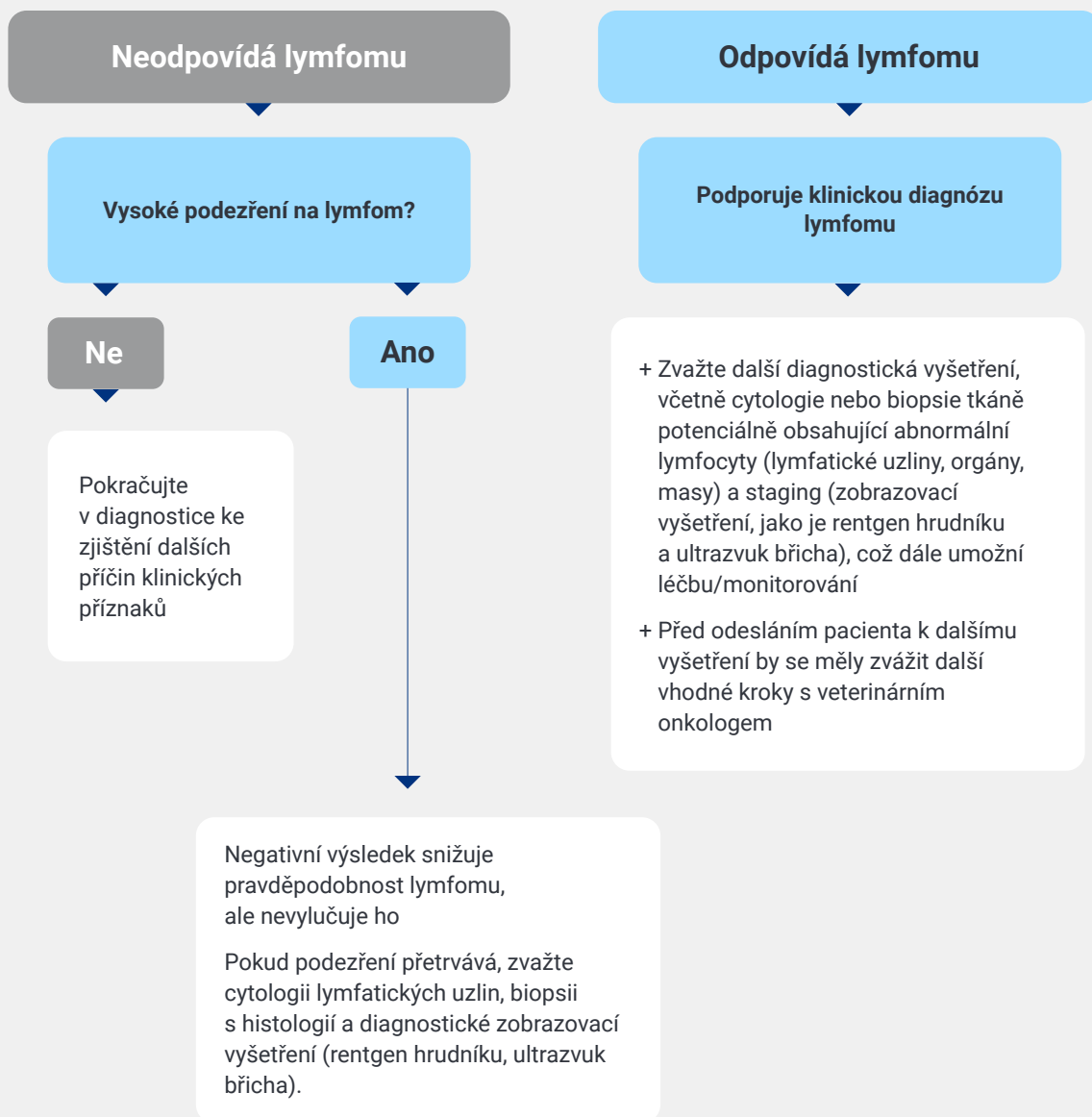

Test IDEXX Cancer Dx™:

Interpretace výsledků u klinicky zdravých psů

Neodpovídá lymfomu

Výsledek nepodporuje přítomnost detekovatelného lymfomu; vyšetřete pacienta při dalším plánovaném preventivním vyšetření*

Odpovídá lymfomu

Zhodnoťte kompletní anamnézu, klinické vyšetření a krevní testy

Pro potvrzení přítomnosti onemocnění lze zvážit další vyšetření, včetně následujících:

- + Aspiráty nebo biopsie lymfatických uzlin/orgánů
- + Diagnostické zobrazovací metody (rentgen hrudníku a ultrazvuk břicha)
- + Průtoková cytometrie krve v případech lymfocytózy

Pokud lymfom není zjištěn, proveďte opětovné klinické vyšetření za 8–12 týdnů (můžete i dříve, pokud se objeví nové příznaky)

*Americká asociace veterinárních nemocnic (American Animal Hospital Association, AAHA) doporučuje u starších psů provádět preventivní prohlídky každých 6 měsíců a u všech ostatních psů každý rok.¹

Literatura

1. Creevy KE, Grady J, Little SE, et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc.* 2019;55(6):267–290. doi:10.5326/JAAHA-MS-6999