


Test Catalyst Cortisol

Stručný návod k použití

Požadavky na skladování a zacházení


- + Uchovávejte v mrazničce (neukládejte do dveří mrazničky).
- + Nevyžaduje zahřátí – použijte rovnou z mrazničky.
- + Testy Catalyst™ Cortisol lze skladovat při pokojové teplotě po dobu až 8 hodin. Po 8 hodinách lze testy vrátit do mrazáku až pětkrát, pokud je fóliový sáček neotevřený.
- + Doporučený objem vzorků:
 - Plná krev: 0,7 cc (700 µl)
 - Sérum/plazma: 100 µl (65 µl minimálně; 300 µl, pokud se měří s použitím jiných slidů)

Stačí jen vložit a spustit!

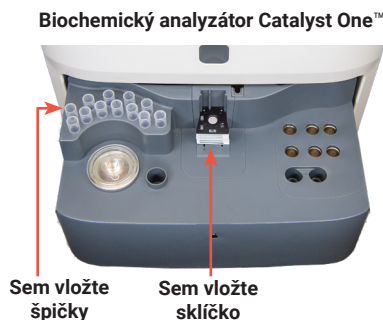

Sem vložte špičky

Sem vložte sklíčko

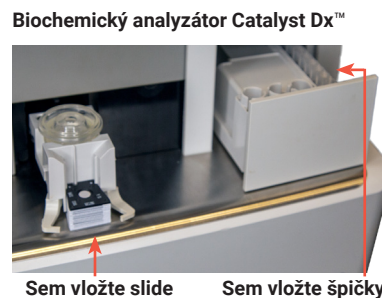

Sem vložte slide

Sem vložte špičky

Často kladené otázky

Otázka	Odpověď
Jak spustím Catalyst Cortisol na svém analyzátoru Catalyst?	Pro analyzátor Catalyst One: + Pro počáteční test kortizolu: Spusťte zpracování vzorku na stanici IDEXX VetLab™. Na obrazovce Výběr Přístrojů klepněte na Catalyst One a poté klepněte na Kortizol. Vyberte požadovaný protokol a jeho další příslušné kroky, klepněte na Uložit a poté klepněte na Spustit. + Pro další testy/testování kortizolu ve více krocích: Všechny vybrané kroky protokolu, když se zpracovával počáteční test, se zobrazí v seznamu Probíhá na domovské obrazovce stanice IDEXX VetLab. Až bude třeba zpracovat další vzorek, klepněte na další dostupný test v seznamu, dále klepněte na Ve frontě a poté klepněte na Spustit. Pro analyzátor Catalyst Dx: + Pro počáteční test kortizolu: Zahajte zpracování vzorku na stanici IDEXX VetLab běžným způsobem. Na konci zpracování vzorku po vyzvání identifikujte protokol a jeho krok a poté klepněte na Odeslat. Poznámka: Pokud chcete do protokolu/kroku protokolu vstoupit později, klepněte na pacienta v seznamu Probíhá, dále klepněte na Přidat podrobnosti a poté vyberte informace o protokolu pacienta. + Pro další testy/testování kortizolu ve více krocích: 1. Vyhledejte počáteční výsledek kortizolu pacienta na stanici IDEXX VetLab NEBO vyberte příslušného pacienta ze seznamu Požadavky na domovské obrazovce. 2. Klepněte na Přidat test a poté klepněte na Přidat výsledky. 3. Na obrazovce Výběr přístrojů vyberte Catalyst Dx. 4. Po vyzvání na konci zpracování vzorku vyberte informace o protokolu běhu a poté klepněte na Odeslat.
Dostanu k výsledkům interpretační komentáře?	Ano! Jakmile vyberete vhodný protokol a dokončíte všechny kroky, budou s konečným výsledkem poskytnuty interpretační komentáře.
Lze test Catalyst Cortisol spustit s jinými sklíčky?	Ano! Test je možné provést samostatně nebo s jinými slidy jako součást kompletního profilu pacienta. Provést můžete například test Catalyst™ Lyte 4 CLIP, test Catalyst™ Chem 17 CLIP, test Catalyst™ SDMA a test Catalyst™ Cortisol s jedním vzorkem pacienta.
Měl by být při zpracování s jinými sklíčky Catalyst Cortisol vložen v určitém pořadí?	+ Sklíčko Catalyst Cortisol lze vložit v libovolném pořadí po elektrolytech. + Při provádění testu Catalyst Cortisol s elektrolytovými sklíčky vždy nejprve vložte elektrolytická sklíčka jako první. + Aby se nejrychleji dosáhlo výsledků, doporučujeme je vkládat v tomto pořadí: Lyte 4 CLIP dospodu, potom chemický CLIP (např. Chem 17, Chem 15), slide Catalyst Cortisol, jakékoliv další slidy a test TT₄ navrch.
Jaké živočišné druhy byly ověřeny testem Catalyst Cortisol a jaké jsou číselné výsledky?	Jen psi Americké jednotky: 0,5–30,0 µg/dl Francouzské jednotky: 14–828 nmol/l
Jaká je doba zpracování testu Catalyst Cortisol?	Výsledky testu Catalyst Cortisol jsou k dispozici přibližně za 13 minut. (Doba do obdržení výsledků se liší v závislosti na typu vzorku a dalších prováděných testech.)
Je v pořádku ředit vzorky, které jsou testovány na kortizol?	IDEXX nepodporuje použití zředěných vzorků při provádění testu Catalyst Cortisol.