



IDEXX

Stručný návod k použití testu SNAP*

Stručný popis testovací soupravy SNAP	3
Analyzátor SNAP Pro*	4
SNAP* 4Dx* Plus Test	5
Test SNAP* Heartworm RT	6
Test SNAP* FIV/FelV Combo.....	7
Test SNAP* cPL.....	8
Test SNAP* fPL	9
Test SNAP* Parvo	10
Test SNAP* <i>Giardia</i>	11
Test SNAP* Feline proBNP	12
Test SNAP* Lepto	13
Test SNAP* FeLV Antigen.....	14
Test SNAP* Foal IgG.....	15
Test SNAP* <i>Leishmania</i>	16
Test SNAP* Leish 4Dx*	17

Legenda



Podporované živočišné druhy.



Doba čtení v minutách.



Skladujte při pokojové teplotě nebo v chladničce.



Skladujte v chladničce.

VŠECHNY součásti MUSÍ mít před provedením testu pokojovou teplotu.

Stručný popis testovacích souprav SNAP

Název testu [†]	Podporované typy vzorků				Uchování* Chlazené = 2 °C – 8 °C Při pokojové teplotě = 2 °C – 25 °C	Velikost vzorku	Počet kapek roztoku	Doba čtení (v minutách)
	Trus	Antikoagulovaná plná krev	Plazma	Sérum				
Test SNAP* 4Dx* Plus		•	•	•	Chlazené až do data expirace, nebo při pokojové teplotě po dobu 6 měs	3 kapky	4	8
Test SNAP* Heartworm RT		•	•	•	Při pokojové teplotě až do data expirace	3 kapky	4	8
Test SNAP* FIV/FelV Combo		•	•	•	Chlazené až do data expirace	3 kapky	4	10
Test SNAP* cPL				•		3 kapky	4	10
Test SNAP* fPL				•		3 kapky	4	10
Test SNAP* Parvo	•				Při pokojové teplotě až do data expirace	Celou špičku tampónu pokryjte tenkou vrstvou trusu.	5	8
Test SNAP* Giardia	•				Chlazené až do data expirace	Celou špičku tampónu pokryjte tenkou vrstvou trusu.	5	8
Test SNAP* Feline proBNP			•	•		3 kapky	5	10
Test SNAP* Lepto				•		3 kapky	4	10
Test SNAP* FeLV Antigen		•	•	•		3 kapky	4	10
Test SNAP* Foal IgG		•	•	•		1 kapka	Celá lahvička, nebo do naplnění jamky	7
Test SNAP* Leishmania		•	•	•	Chlazené až do data expirace, nebo při pokojové teplotě po dobu 6 měsíců	3 kapky	4	8
Test SNAP* Leish 4Dx*		•	•	•		3 kapky	4	8

*Kompletní požadavky ke skladování naleznete v příbalové informaci.

†Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Připravte test SNAP, ale neaktivujte jej.*

Po zobrazení výzvy analyzátozem SNAP Pro začněte opatrně zasouvat test SNAP do otvoru v dolní části analyzátoru (koncem s jamkou dopředu), dokud nezapadne do příslušné pozice.



Nesprávně



Správně

Po dokončení analýzy se výsledky zobrazí na obrazovce a výsledky se uloží do analyzátoru. Barva stavové kontrolky označuje výsledky spuštění:



Svítilící zelená

Všechny výsledky jsou negativní.



Blikající modrá

Nejméně jeden výsledek je pozitivní.



Blikající žlutá

Je nutné provést vizuální potvrzení.
(Pro více informací viz návod k použití).

Interpretace ikon analyzátoru SNAP Pro

Ikona	Popis
	Stav bezdrátového signálu (Wi-Fi) (5 šedých pruhů = nejlepší signál; 5 červených pruhů = bez signálu)
	Ztracené Wi-Fi připojení
	Připojení a komunikace se stanicí IDEXX VetLab® přes kabelové připojení (červená ikona označuje, že analyzátor je offline)
	Ztracené ethernetové připojení
	Nabíjení baterie
	Je k dispozici upgrade softwaru (pouze zákaznické služby SmartService® Solutions)

Ikona	Popis
	Upozornění na varování (šedá ikona označuje, že bylo zobrazeno varování a je nevyřešené)
	Upozornění na chybu (šedá ikona označuje, že byla zobrazena chyba a je nevyřešená)
	Ztráta komunikace se stanicí IDEXX VetLab

Více informací nebo možnost objednat si tento produkt získáte na stránkách idexx.cz/snap-pro nebo idexx.sk/snap-pro

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

Test SNAP* 4Dx* Plus

Každoroční preventivní vyšetření psů na šest patogenů způsobujících onemocnění přenášené vektory.



Lze skladovat při pokojové teplotě až po dobu 6 měs.*

Provedení testu†



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP 4Dx Plus.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **8 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek plné krve[§],
séra nebo plazmy

Pozitivní kontrola


E. canis / *E. ewingii* Ab

B. burgdorferi Ab

A. phagocytophilum/

A. platys Ab

D. immitis Ag

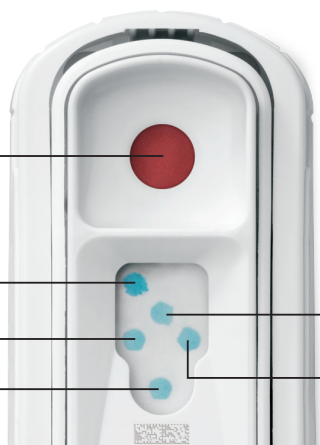

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Doba expirace testů vyprší po 6 měs při pokojové teplotě. Pokud testy nebudou skladovány při pokojové teplotě, lze je uchovávat chlazené až do data expirace. Kompletní požadavky ke skladování naleznete v příbalové informaci.

†Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

§Antikoagulovaná plná krev (např. EDTA, heparin).

Test SNAP* Heartworm RT

Každoroční preventivní vyšetření psů na dirofilárie.



Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP Heartworm RT.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **8 minutách** odečtěte výsledek testu.


Vzorek plné krve†, séra nebo plazmy

Pozitivní kontrola

Vysoký indikátor antigenu

Nízký indikátor antigenu

Negativní kontrola

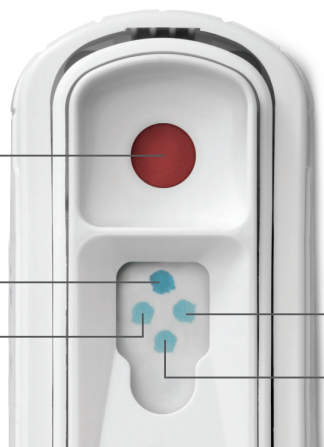

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

†Antikoagulovaná plná krev (např. EDTA, heparin)

Test SNAP* FIV/FelV Combo

Vyšetření koček na virus kočičí FIV a FeLV. (Preventivní vyšetření ohrožených koček, i vyšetření koček symptomatických, nových koček v domácnosti, rizikových koček.



Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP FIV/FelV Combo.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **10 minutách** odečtete výsledek testu.


Vzorek plné krve†, séra nebo plazmy

Pozitivní kontrola

FIV Ab

FelV Ag

Negativní kontrola

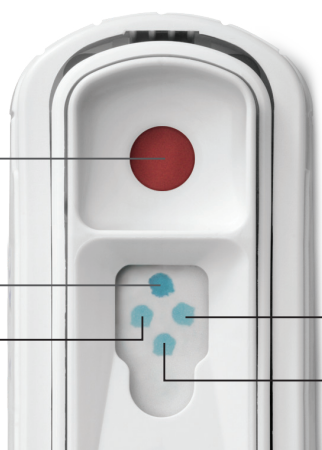

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

†Antikoagulovaná plná krev (např. EDTA, heparin)

Test SNAP* cPL

Testování psů se symptomy zvracení, anorexie a/nebo bolestmi břicha a podezření na pankreatitidu.



Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP cPL.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO


Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **10 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek séra

Literatura

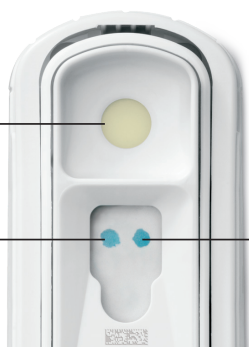

Specifická pankreatická lipáza

Abnormální

Terčík vzorku má stejnou nebo o něco tmavší barvu než kontrolní terčík.



Normální

Terčík vzorku je světlejší než kontrolní terčík.

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

Test SNAP* fPL

Testování koček se symptomy letargie, sníženou chutí k jídlu, dehydratací, úbytkem hmotnosti, zvracením a/nebo průjmem.



Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP fPL.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO


Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **10 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek séra

Literatura

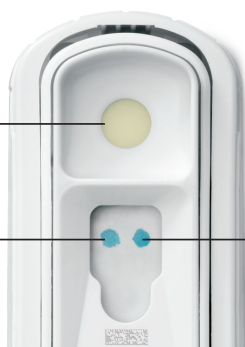

Specifická pankreatická lipáza

Abnormální

Terčík vzorku má stejnou nebo o něco tmavší barvu než kontrolní terčík.



Normální

Terčík vzorku je světlejší než kontrolní terčík.

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

Test SNAP* Parvo

Testování psů se symptomy letargie, horečkou, zvracením nebo průjemem.



Lze skladovat při pokojové teplotě.*


Provedení testu†



1. Odeberte vzorek‡ a umístěte špičku tampónu do zkumavky. Ohněte baňku, aby se zlomilo těsnění a uvolnil se konjugát.



2. Baňku **3krát** stiskněte a uvolněte, aby se vzorek a konjugát smíchaly.

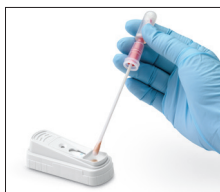

3. Stisknutím baňky nadávkuje **5 kapek** do testovací jamky zařízení SNAP Parvo.




4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **8 minutách** odečtěte výsledek testu.

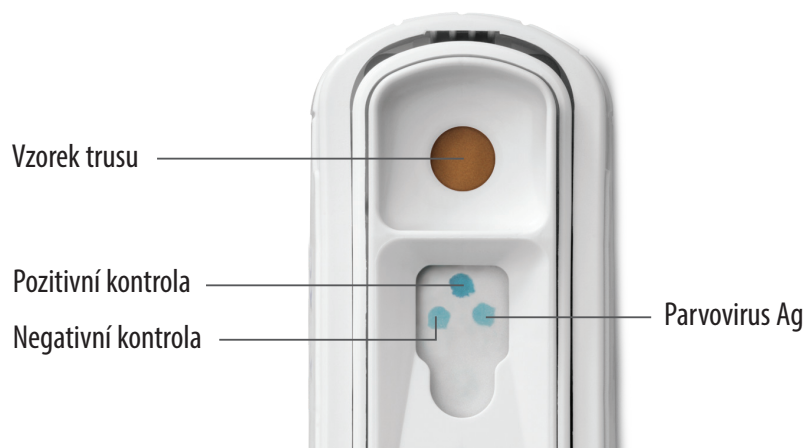

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Kompletní požadavky ke skladování naleznete v příbalové informaci.

†Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

‡Tampóny pro odběr vzorku nejsou určeny pro rektální výtěr.

Test SNAP* *Giardia*

Testování koček a psů s průjemem.



Provedení testu*



1. Odeberte vzorek[†] a umístěte špičku tampónu do zkumavky. Ohněte baňku, aby se zlomilo těsnění a uvolnil se konjugát.



2. Baňku **3krát** stiskněte a uvolněte, aby se vzorek a konjugát smíchaly.



3. Stisknutím baňky nadávkuje **5 kapek** do testovací jamky zařízení SNAP *Giardia*.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **8 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek trusu

Pozitivní kontrola

Negativní kontrola



Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

† Tampóny pro odběr vzorku nejsou určeny pro rektální výtěr.

Test SNAP* Feline proBNP

Testování koček s podezřením na přítomnost srdečních onemocnění. Symptomy: (srdeční šelest, arytmie, respirační příznaky, před anestezií nebo kvůli plemenu, anamnéze či stáří).



Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku a 5 kapek zeleného konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP Feline proBNP.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO


Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **10 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek séra nebo vzorek plazmy s EDTA

Literatura

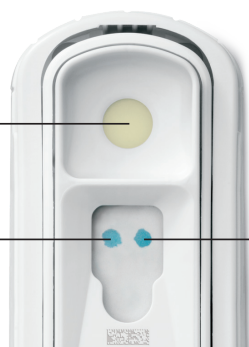

NT-proBNP

Abnormální

Terčík vzorku má stejnou nebo o něco tmavší barvu než kontrolní terčík.



Normální

Terčík vzorku je světlejší než kontrolní terčík.



Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

Test SNAP* Lepto

Testování psů při podezření na leptospirózu.



Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP Lepto.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.



5. Po **10 minutách** odečtete výsledek testu.



Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.


*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

Test SNAP* FeLV Antigen

Testování koček na přítomnost viru kočičí leukémie (FeLV).



Provedení testu*

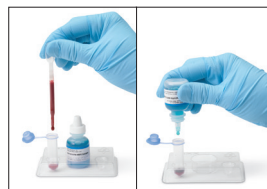

1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapky konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.



3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP FeLV Antigen.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.




5. Po **10 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek plné krve†, séra nebo plazmy

Pozitivní kontrola

Negativní kontrola

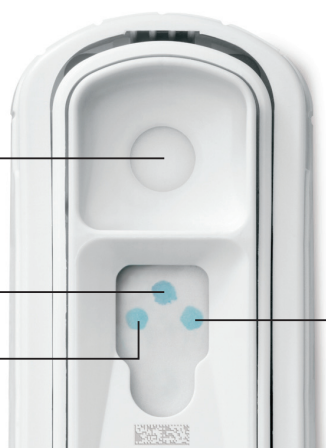

FeLV Ag

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.


†Antikoagulovaná plná krev (např. EDTA, heparin)

Test SNAP* Foal IgG


Testování hladiny imunoglobulinu G (IgG) u hříbat.




Provedení testu*

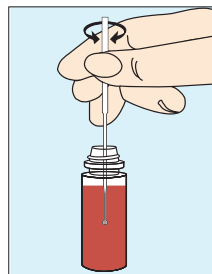

1. Zředte vzorek.[†]
Důkladně promíchejte
a nadávkujte prvních
5–10 kapek
z lahvičky.

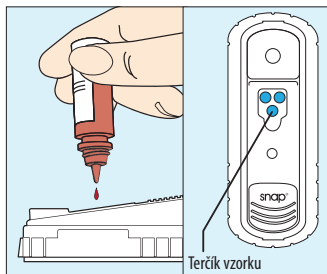

2. Na terčik vzorku naneste **1 kapku**
vzorku.

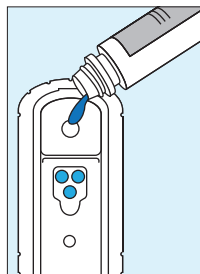

3. Přelijte celý obsah
lahvičky s konjugátem
do testovací jamky.



4. Až se na aktivačním kroužku
poprvé zobrazí barva, pevně
zařízení stiskněte, aby se
aktivovalo. Ozve se slyšitelné
„cvaknutí“.




5. Po **7 minutách** odečtěte
výsledek testu.

Vzorek plné krve[†],
sérum nebo plazmy

Terčik kalibrátoru
400 mg/dl


Terčik vzorku

800 mg/dl
terčik kalibrátoru

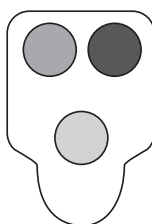


≤ 400 mg/dl IgG

Intenzita barvy terčiku vzorku je světlejší nebo stejná
jako terčik kalibrátoru 400 mg/dl.

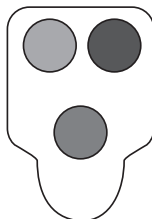

400–800 mg/dl IgG

Intenzita barvy terčiku vzorku je tmavší než terčik
kalibrátoru 400 mg/dl, ale světlejší nebo stejná jako
terčik kalibrátoru 800 mg/dl.

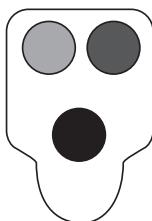

> 800 mg/dl IgG

Intenzita barvy terčiku vzorku je tmavší než terčik
800 mg/dl.

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

[†] Vzorek antikoagulované plné krve (např. EDTA, heparin), sérum nebo plazmy.

Test SNAP[®] *Leishmania*

Testování psů na leishmanii.



Lze skladovat při pokojové teplotě po dobu 6 měsíců.*

Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapek konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5krát převratte** a promíchejte.




3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP *Leishmania*.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro[®] k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO


Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.

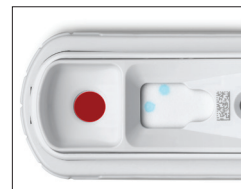

5. Po **8 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek plné krve[†],
séra nebo plazmy

Pozitivní kontrola

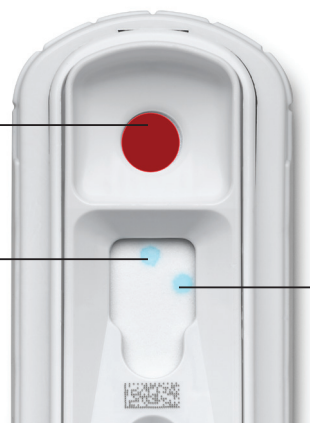

Terčík vzorku na *Leishmanii*

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách idexx.cz/snap-testy nebo idexx.sk/snap-testy.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

[†]Antikoagulovaná plná krev (např. EDTA, heparin)

Test SNAP* Leish 4Dx*

Proveďte preventivní vyšetření psů na šest nemocí přenášených vektory.



Lze skladovat při pokojové teplotě po dobu 6 měsíců.*

Provedení testu*



1. Pomocí dodané pipety napipetujte **3 kapky vzorku** a **4 kapek konjugátu** do zkumavky.



2. Opatrně **3–5 krát převratte** a promíchejte.




3. Přelijte celý obsah zkumavky do testovací jamky zařízení SNAP Leish 4Dx.



4. Použijte analyzátor SNAP Pro® k automatické aktivaci testu SNAP a interpretaci výsledku.

NEBO

Až se na aktivačním kroužku **poprvé** zobrazí barva, pevně zařízení stiskněte, aby se aktivovalo. Ozve se slyšitelné „cvaknutí“.

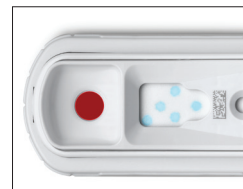


5. Po **8 minutách** odečtěte výsledek testu.

Vzorek plné krve[§],
sérum nebo plazmy

Pozitivní kontrola

E. canis / *E. ewingii* Ab

L. infantum

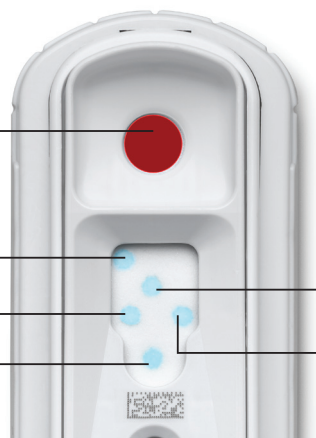

A. phagocytophilum/

A. platys Ab

D. immitis Ag

Více informací nebo možnost objednat si tento test získáte na stránkách **idexx.cz/snap-testy** nebo **idexx.sk/snap-testy**.

*Před zahájením jakéhokoli testu si přečtěte příbalový leták, kde najdete kompletní pokyny.

†Antikoagulovaná plná krev (např. EDTA, heparin)

Máte nějaké otázky?

Kontaktujte zákaznickou a technickou podporu
IDEXX na čísle:

CZ +420 239 018 034

SK +421 268 622 417

